



Anleitung und Hinweise zur Probenentnahme für die BabyBiom-Studie




A) Speichelprobe Familie

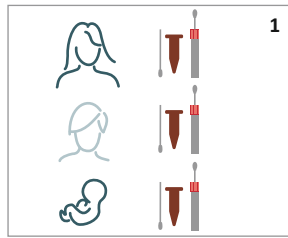


Probenentnahme von allen Familienmitgliedern gleich. Sie benötigen ein Teststäbchen, ein markiertes Röhrchen und ein OraCollect Röhrchen.

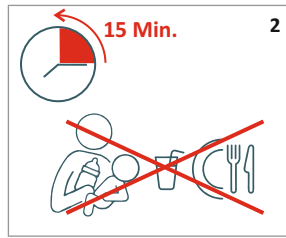

Wichtig:
Bitte 15 Minuten vor Probenentnahme nicht stillen, trinken, essen.

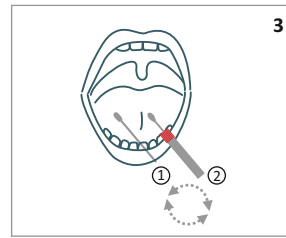


Nacheinander mit den Teststäbchen und OraCollect Stäbchen im Mund mehrmals drehen und mit Speichel 15 Sekunden vollsaugen lassen.

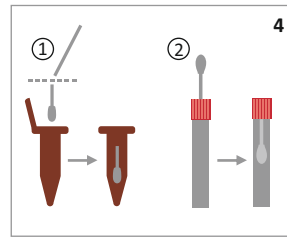

1) Röhrchen öffnen und Teststäbchen im Agar-Gelee versenken, abbrechen und Röhrchen fest verschließen.
2) Deckel mit Stäbchen vorsichtig abschrauben und mit dem Stäbchen voran in dem Röhrchen erneut festschrauben. Schütteln. (Siehe Packungsaufdruck.) **Vorsicht: Flüssigkeit im Röhrchen nicht verschütten.**

B) Stuhlprobe Toilette

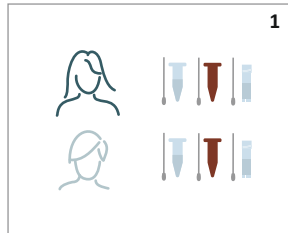


Probenentnahme von allen Familienmitgliedern die die Toilette benutzen. Sie benötigen je drei Teststäbchen, zwei markierte Röhrchen und ein Schraubröhrchen.




Wichtig:
Bitte vor der Kontrollprobe (Bild 3) und Stuhlgang spülen.




Für die Kontrollprobe das Teststäbchen kurz in das Spülwasser halten.

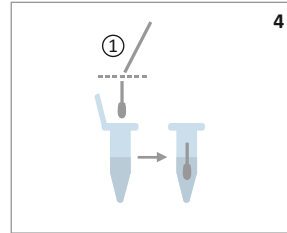


Röhrchen öffnen und Teststäbchen im Agar-Gelee versenken, abbrechen und Röhrchen fest verschließen.

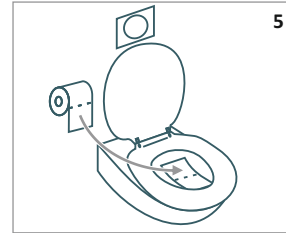

Vor dem Stuhlgang Toilettenpapier einlegen um versinken des Stuhls zu verhindern.

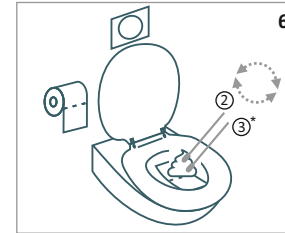


Nacheinander mit beiden Teststäbchen unter leichter Rotation die Proben entnehmen. Kontakt mit Spülwasser vermeiden.

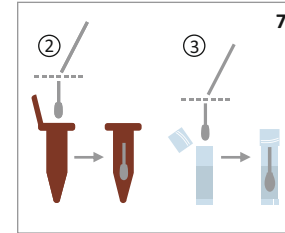


1) Röhrchen öffnen und Teststäbchen im Agar-Gelee versenken, abbrechen und Röhrchen fest verschließen.
2) Deckel vorsichtig abschrauben und Teststäbchen in der Flüssigkeit versenken, abbrechen und Deckel erneut festschrauben. Schütteln.
Vorsicht: Flüssigkeit im Röhrchen nicht verschütten.*


C) Stuhlprobe Windel

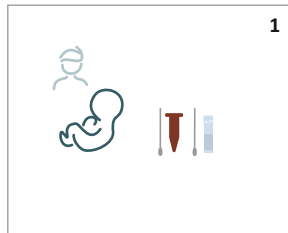


Probenentnahme vom Baby und Kleinkindern die eine Windel tragen. Sie benötigen zwei Teststäbchen, ein markiertes Röhrchen und ein Schraubröhrchen.

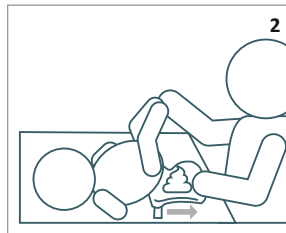

Die schmutzige Windel wegziehen.

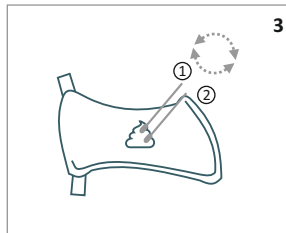


Nacheinander mit beiden Teststäbchen unter leichter Rotation die Proben entnehmen.

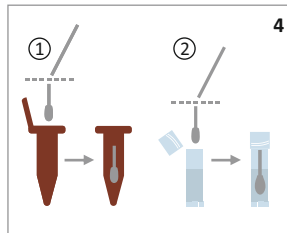


1) Röhrchen öffnen und Teststäbchen im Agar-Gelee versenken, abbrechen und Röhrchen fest verschließen.
2) Deckel vorsichtig abschrauben und Teststäbchen in der Flüssigkeit versenken, abbrechen und Deckel erneut festschrauben. Schütteln.
Vorsicht: Flüssigkeit im Röhrchen nicht verschütten.*

D) Lagerung & Versand

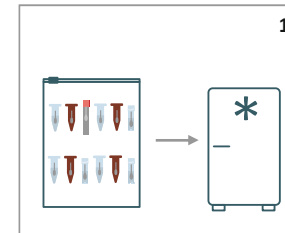

Vor Probenentnahme kann alles Material bei Raumtemperatur gelagert werden. Danach die Proben bitte im Zip-Lock Beutel bis zum Versand bei 4°C lagern.

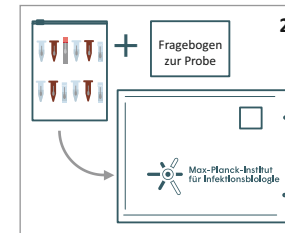

Bitte alle Proben zusammen mit dem ausgefüllten Fragebogen im Zip-Lock Beutel in den bereitgestellten, vorfrankierten Luftpolsterumschlag geben und abschicken.

*** Die Flüssigkeit enthält RNAlater (Invitrogen, AM7020). Bei Kontakt mit den Augen oder Haut mit Wasser spülen. Nicht inhalieren oder einnehmen. Bei Unwohlsein einen Arzt kontaktieren.**